

Respirație Cheyne-Stokes, Apnee Centrală, Apnee Obstructivă


Soluția All-in-One

Servo ventilație + Auto Cpap + Backup respirație = SleepOne ProSV™

- Presiune de suport automată
- Auto EPAP
- Rată automată de backup
- Poate funcționa și ca servo ventilație în mod CPAP (suport minim de presiune = 0)


Apnea obstructivă

Apnea centrală

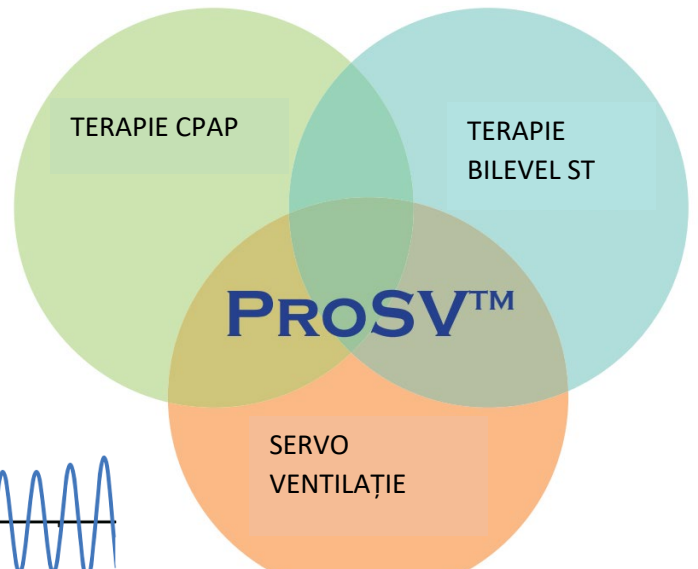

Respirație Cheyne-Stokes

Un dispozitiv complex pentru creșterea complexității pacientului!

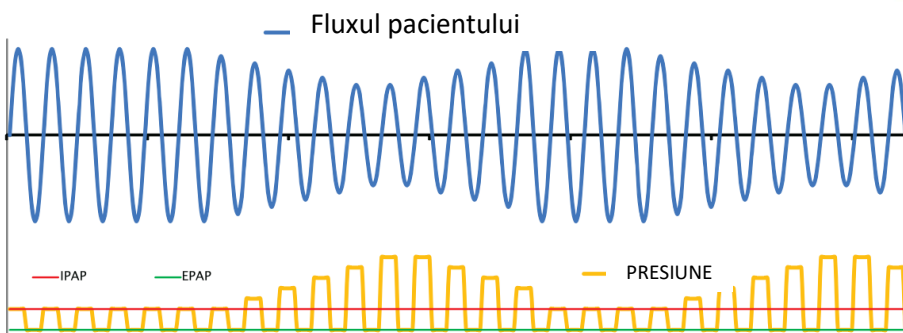

ProSV reacționează instantaneu la schimbările în efortul pacientului.

Specificatii tehnice

Interval de presiune	4-35 CMH 2 0
Mod de lucru	ProSV Active Servo Ventilation, CPAP
Tipul de ventilație	Ventilație de scurgere
Tensiune	100 - 240 V AC
Umidificator	Umidificator încălzit SleepOne
Management de date	Cardul SD stochează date detaliate despre terapie din maxim 365 de nopți.



Evenimentul

Apnee obstructivă
Hipopnee
Sforăit
Scăderea fluxului pacientului
Apneea complexă
RERA
Respirație cu scurgeri periodice crescute
Rată respiratorie scăzută

Acțiune

Modificare EPAP
Modificare EPAP
Modificare EPAP
Modificarea presiunii de suport
Test de blocare a căilor respiratorii
Schimbare EPAP
Marcat pentru raportare
Marcat pentru raportare
Backup respirație

